

## GlobalMed – instalacja programu licencja mini/standard


W pierwszej kolejności należy nadać odpowiednie uprawnienia na [portalu świadczeniodawcy/SZOI](#) użytkownikom, którzy będą korzystać z programu.

Aby zainstalować program i przeprowadzić konfigurację centrali, wymagane będą następujące dokumenty:

- Plik licencyjny w wersji elektronicznej (otrzymany na adres e-mail z fakturą pro forma przy zakupie programu, dostępny do pobrania po zarejestrowaniu na Panelu Klienta: <https://panel.norcom.pl/2016/>),
- Plik umowy z NFZ w wersji elektronicznej (do pobrania z portalu NFZ),
- Numer klienta, który znajduje się na fakturze pro forma.

## INSTALACJA I KONFIGURACJA

1. Program należy pobrać ze strony <https://globalmed.pl/pliki>. Instalacja powinna być przeprowadzona na jednym stanowisku w wersji mini, lub na stanowisku głównym w wersji standard.
2. Instalację programu GlobalMed należy rozpocząć od uruchomienia aplikacji jako administrator.

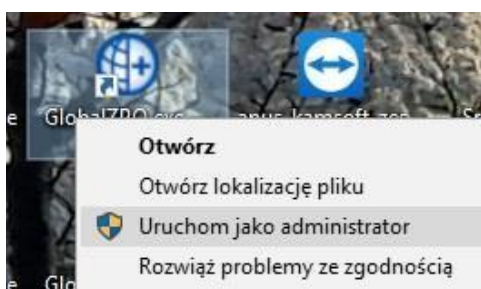


Przy pierwszym uruchomieniu program działa w wersji demo. Aby program działał zgodnie z zakupioną licencją, konieczna jest jego konfiguracja.




GlobalMed

- a. Należy przejść do zakładki **Administrator -> Dane świadczeniodawcy** i uzupełnić wszystkie wymagane dane, oznaczone na żółto.

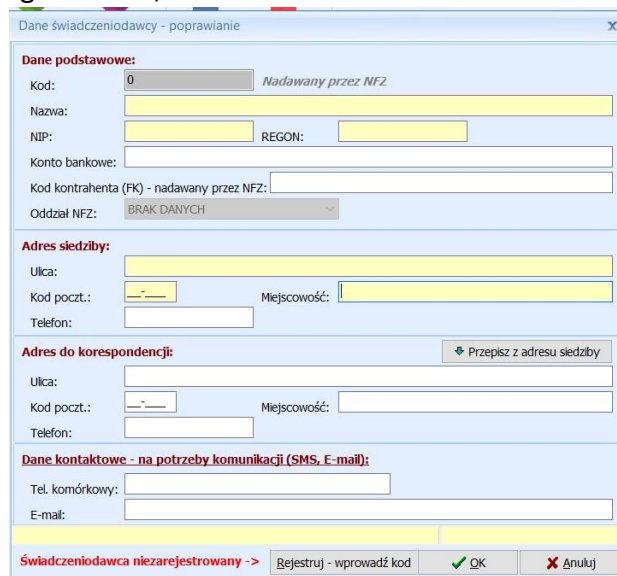

Po zapisaniu danych, aplikację należy zrestartować, uruchamiając ją ponownie jako administrator.

- b. Następnie należy ponownie wejść w zakładkę **Administrator -> Dane świadczeniodawcy** i zarejestrować kod świadczeniodawcy.

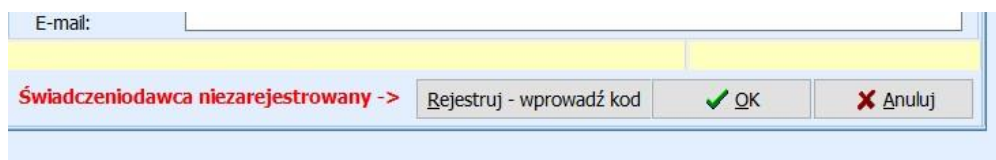

**WAŻNE:** Kody świadczeniodawcy mogą się różnić w zależności od oddziału NFZ. Przed zatwierdzeniem należy zwrócić uwagę, czy kod został wpisany w odpowiednim formacie. Błędne wpisanie kodu świadczeniodawcy może spowodować problemy z importem umowy do programu. Kod świadczeniodawcy można zweryfikować na portalu NFZ.



GlobalMed

Rejestracja świadczeniodawcy

Podaj kod świadczeniodawcy - nadawany przez OW NFZ

Kod: 121/020000

Oddział NFZ: 12 - ŚLĄSKI

Lista oddziałów NFZ

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 01 - Dolnośląski         | 09 - Podkarpacki          |
| 02 - Kujawsko - Pomorski | 10 - Podlaski             |
| 03 - Lubelski            | 11 - Pomorski             |
| 04 - Lubuski             | 12 - Śląski               |
| 05 - Łódzki              | 13 - Świętokrzyski        |
| 06 - Małopolski          | 14 - Warmińsko - Mazurski |
| 07 - Mazowiecki          | 15 - Wielkopolski         |
| 08 - Opolski             | 16 - Zachodniopomorski    |

Zasady budowy kodu świadczeniodawcy

Przykłady kodów:

- 120/500029
- 123/500024

OK Anuluj



#### Moja struktura organizacyjna

Tu zapoznasz się z podstawowymi informacjami na Twój temat zgromadzonymi w systemie NFZ

► Moje podstawowe dane

► Moje pełne dane (Portal Potencjału)

#### Dane ogólne

Kod świadczeniodawcy: 121/

Nazwa świadczeniodawcy:

Po zapisaniu danych, aplikację należy zrestartować, uruchamiając ją ponownie jako administrator.

- c. Po ponownym uruchomieniu program poprosi o wpisanie numeru klienta oraz NIP-u (należy wpisać ciąg cyfr bez myślników). Numer klienta znajduje się na fakturze.

NABYWCA: [Redacted]

NIP 734 [Redacted]


Numer klienta 8( [Redacted]

| Lp. | Nazwa towaru                                       | Ilość | Jedn. miary | Cena bez rabatu | Rabat %    | Cena jednostkowa | Wartość bez podatku | Wartość z podatkiem |
|-----|----------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | Program GlobalMed - MINI<br>licencja do 2021-03-31 | 1,00  | szt.        | [Redacted]      | [Redacted] | [Redacted]       | [Redacted]          | [Redacted]          |

- d. Należy przejść do zakładki **Administrator** -> **Wczytaj plik licencji** i wskazać plik licencyjny programu, który został otrzymany.





GlobalMed

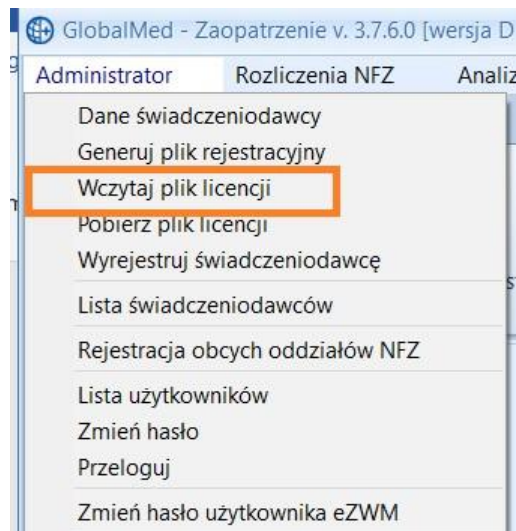

Po załadowaniu licencji, aplikację należy ponownie zrestartować i uruchomić jako administrator.

- e. Kolejnym krokiem jest załączenie umowy NFZ. Należy przejść do zakładki **Rozliczenia NFZ** -> **Lista umów** i zaimportować plik umowy (umx/xml), pobrany ze strony NFZ.

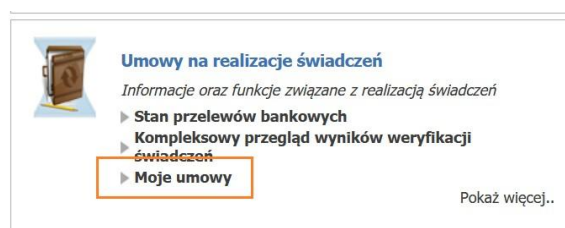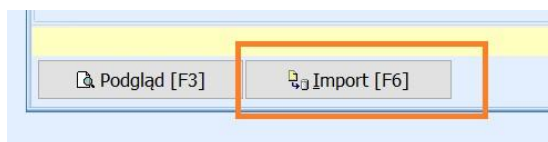

- f. Po wykonaniu powyższych czynności wymagany jest restart aplikacji. Na tym etapie zakończona została konfiguracja wersji mini.

Jeśli zakupiona została wersja standard (kilku stanowiskowa), należy przejść do kolejnych kroków.



**GlobalMed**

3. Program należy zainstalować na pozostałych stanowiskach zgodnie z powyższą instrukcją. Będą one łączyć się z bazą zainstalowaną na komputerze głównym. Aby program poprawnie łączył się z serwerem, w pliku **baza.ini** (znajdującym się w katalogu, w którym zainstalowany jest system GlobalMed, domyślnie: **C:\NORCOM\GlobalZPO**) należy umieścić następujące zapisy:
- W zmiennej **Server** należy wpisać adres IP serwera,
  - W zmiennej **Path** należy wpisać ścieżkę, identyczną jak w parametrze **Path** komputera pełniącego rolę serwera,
  - Zmienną **ignoruj** należy usunąć lub przypisać jej wartość 0.