


## Przeniesienie bazy danych na nowy komputer


### 1. Wykonanie kopii bezpieczeństwa na komputerze, z którego chcemy przenieść bazę

Na dotychczasowym komputerze uruchamiamy program **GlobalMed** i wykonujemy kopię bazy danych.

Aby to zrobić, należy przejść do zakładki:  
**Narzędzia** → **Wykonaj kopię GDB/ZIP**.

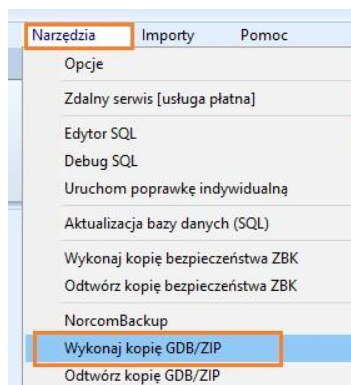

Następnie należy wskazać katalog, w którym kopia ma zostać zapisana.

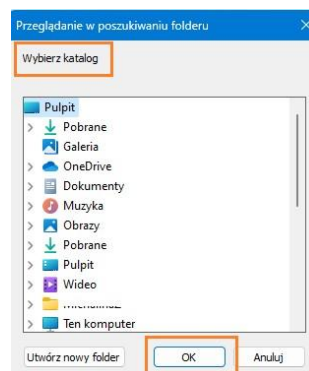

Zapisany plik kopiujemy na nośnik pamięci przenośnej (pendrive).

### 2. Instalacja programu GlobalMed

Program należy pobrać ze strony: <https://globalmed.pl/pliki>

### 3. Odtworzenie kopii bezpieczeństwa





Zapisany plik na nośniku pamięci przenośnej (pendrive) i przenosimy na nowy komputer i kopiujemy do katalogu **C:/Norcom/GlobalZPO**

Następnie uruchamiamy zainstalowany program **GlobalMed**.

Po uruchomieniu, nie należy rejestrować nowego świadczonodawcy – wskazujemy kopię bazy danych.



GlobalMed

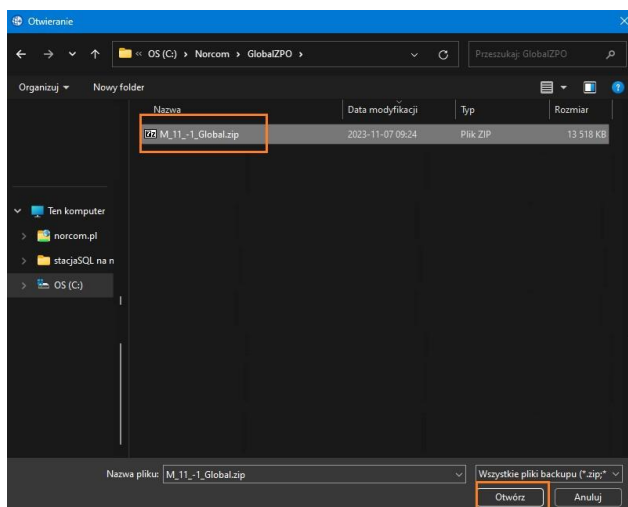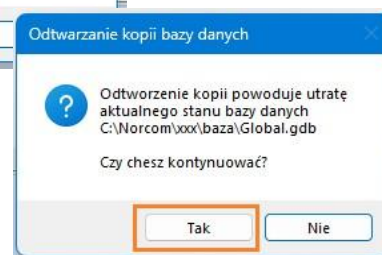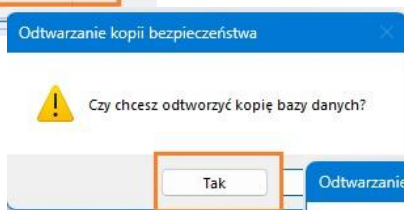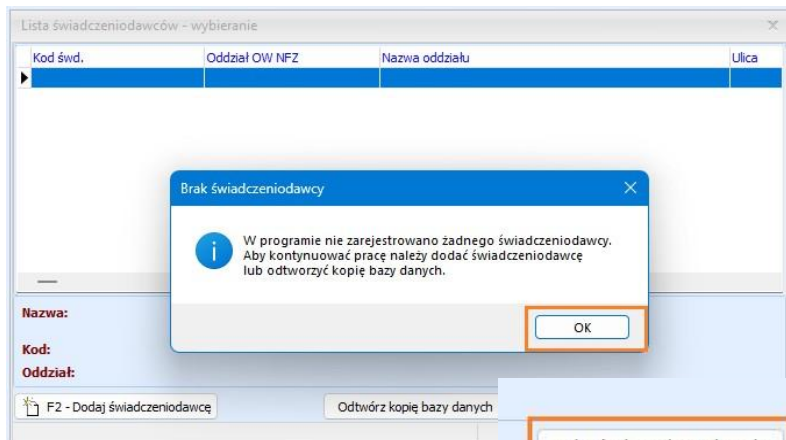



GlobalMed

Po odtworzeniu kopii program zostanie uruchomiony w wersji demo. Aby móc w pełni korzystać z funkcji programu, należy pobrać dane licencji, wpisując numer klienta (otrzymany przy składaniu zamówienia) oraz numer NIP (ciąg 10 znaków bez myślników).

Numer klienta

Proszę o podanie numeru klienta. Numer klienta znajduje się na fakturze PRO FORMA. xxxxx|

OK Cancel

Numer klienta

Proszę o podanie numeru NIP. xxxxxxxxxxxx|

OK Cancel

Po poprawnym wpisaniu danych, licencja zostanie zaktualizowana i należy ponownie uruchomić program.

Informacja

Licencja została zaktualizowana. Proszę ponownie uruchomić program GlobalMED.

OK

Po uruchomieniu, **GlobalMed** sprawdzi, czy są dostępne aktualizacje. Jeśli jest dostępna nowa wersja programu, zostanie ona pobrana automatycznie. Komunikat o trwającej aktualizacji pojawi się po uruchomieniu.

Po zakończeniu aktualizacji program zostanie ponownie uruchomiony i będzie gotowy do zalogowania.