



GlobalMed

Przeniesienie bazy danych na nowy komputer


1. Wykonanie kopii bezpieczeństwa na komputerze, z którego chcemy przenieść bazę
2. Instalacja programu GlobalMed
3. Odtworzenie kopii bezpieczeństwa
4. Aktywacja licencji
5. Aktualizacja oprogramowania

1. Wykonanie kopii bezpieczeństwa na komputerze, z którego chcemy przenieść bazę


- Uruchom program GlobalMed na komputerze, z którego chcesz przenieść bazę danych.

- Przejdź do zakładki Narzędzia

→ Wykonaj kopię bazy danych.

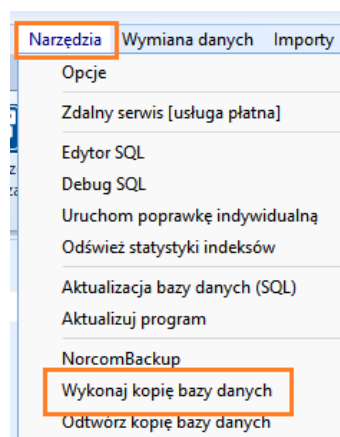

- Wskaż katalog, w którym kopia ma zostać zapisana.

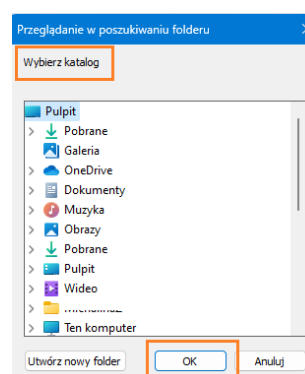

- Po zapisaniu pliku skopiuj go na nośnik pamięci przenośnej (np. pendrive).



GlobalMed

2. Instalacja programu GlobalMed

- Pobierz program ze strony: <https://globalmed.pl/do-pobrania/>.
- Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z instrukcjami instalatora.

3. Odtworzenie kopii bezpieczeństwa

- Skopiuj zapisany plik z nośnika pamięci do katalogu **C:/Norcom/GlobalZPO** na nowym komputerze.
- Uruchom program GlobalMed.
- Nie rejestruj nowego świadczeniodawcy – wskaż kopię bazy danych.
- Wskaż zapisany plik z kopią bazy danych i zatwierdź wybór.

Lista świadczeniodawców - wybieranie

Kod śwtd.	Oddział OW NFZ	Nazwa oddziału	Ulica
-----------	----------------	----------------	-------

Brak świadczeniodawcy

W programie nie zarejestrowano
Aby kontynuować pracę należy
lub odtworzyć kopię bazy danych

Odtwórz kopię bazy danych

Nazwa:
Kod:
Oddział:

F2 - Dodaj świadczeniodawcę Odtwórz kopię bazy danych

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa

Czy chcesz odtworzyć kopię bazy danych?

Tak Nie

Odtwarzanie kopii bazy danych

Odtworzenie kopii powoduje utratę
aktualnego stanu bazy danych
C:\Norcom\xxx\baza\Global.gdb

Czy chcesz kontynuować?

Tak Nie

Otwieranie

OS (C:) > Norcom > GlobalZPO

Przeznaczenie: GlobalZPO

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
M_11_1_Global.zip	2023-11-07 09:24	Plik ZIP	13 518 KB

Nazwa pliku: M_11_1_Global.zip

Wszystkie pliki backupu (*.zip*)

Otwórz Anuluj



GlobalMed

4. Aktywacja licencji

- Po odtworzeniu kopii program uruchomi się w **wersji demo**.
- Aby w pełni korzystać z programu, wprowadź **numer klienta** (otrzymany przy składaniu zamówienia) oraz **numer NIP**.
- Po poprawnym wpisaniu danych licencja zostanie zaktualizowana.
- Ponownie uruchom program, aby zmiany zostały zastosowane.

Numer klienta

Proszę o podanie numeru klienta. Numer klienta znajduje się na fakturze PRO FORMA. XXXXX

OK Cancel

Numer klienta

Proszę o podanie numeru NIP. XXXXXXXXXXXX

OK Cancel

Informacja

Licencja została zaktualizowana. Proszę ponownie uruchomić program GlobalMED.

OK

5. Aktualizacja oprogramowania

- Przy każdym uruchomieniu **GlobalMed** sprawdza dostępność aktualizacji.
- Jeśli nowa wersja jest dostępna, pobierze się automatycznie.
- Po zakończeniu aktualizacji program uruchomi się ponownie i będzie gotowy do zalogowania.